

# Ortholingual DCL



## Sistema protesico biofunzionale

La linea denti SR Ortholingual DCL è una componente importante del sistema BPS.

Alla base del sistema protesico biofunzionale vi sono ricercatori e specialisti, che hanno riunito le loro conoscenze in un oculto concetto protesico.

Il sistema BPS è un prodotto di marca, che, grazie ad una perfetta armonia fra le varie componenti, consente una lavorazione particolarmente efficace.

Il sistema BPS è orientato alla routine quotidiana ed offre formazione qualificata, nonché consulenza personale e supporto ad ogni quesito.

## Estetica espressiva e materiale DCL di elevata qualità

### Presentazione SR Ortholingual DCL

3 forme posteriori superiori: LU3, LU5, LU6  
3 forme posteriori inferiori: LL3, LL5, LL6

#### Colori:

16 A-D  
4 Bleach  
6 Chromascop

#### Valori fisici:

Resistenza alla flessione (DIM 13'907)	100 MPa
Modulo di elasticità (DIM 13'907)	3'300 MPa
Durezza Vickers HV 0,5/30 (Norma interna PV-324)	200 MPa
Legame al polimerizzante a caldo (DIM 13'914)	130 MPa

#### Manuale:

„Occlusioni alternative in protesi completa“  
Dr. Brien R. Lang  
Dr. Frank R. Lauciello  
Dr. Glen P. McGivney  
Dr. Sheldon Winkler



Il manuale è disponibile solo sul sito [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)  
0411/i

Produttore  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Bendererstrasse 2  
FL-9494 Schaan  
Fürstentum Liechtenstein  
Tel. +423 / 235 35 35  
Fax +423 / 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Distribuzione Italia  
**Ivoclar Vivadent s.r.l.**  
Via Isonzo 67/69  
I-40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Italia  
Tel. 051 / 6113555  
Fax 051 / 6113565  
[www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)  
e-mail [info@ivoclarvivadent.it](mailto:info@ivoclarvivadent.it)

  
**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation

# Ortholingual DCL



Funzionalità ed estetica



# SR Ortholingual DCL

Combina estetica ed occlusione ad un

Lo specialista del concetto di montaggio dell'occlusione lingualizzata.

Dalla triplice stratificazione, di elevata qualità, risulta un'estetica espressiva, particolarmente indicata per riabilitazioni individuali in studio e laboratorio.

Le sue particolari caratteristiche si basano sulle superfici occlusali, concepite espressamente per un montaggio lingualizzato, ed uniscono estetica e funzionalità per il paziente esigente.




## SR Ortholingual DCL offre

- rapido e semplice montaggio denti
- compatibile con la calotta 2D e 3D Ivoclar Vivadent
- la base del dente ridotta, evita il lavoro di fresaggio nel montaggio del dente
- dalle cuspidi palatali superiori accentuate risulta una centrica lingualizzata definita in maniera precisa
- ridotta abrasione, grazie al materiale DCL
- la fossa centrale continua minimizza contatti prematuri
- faccia vestibolare dei premolari extra-lunga




# eccellente comportamento abrasivo

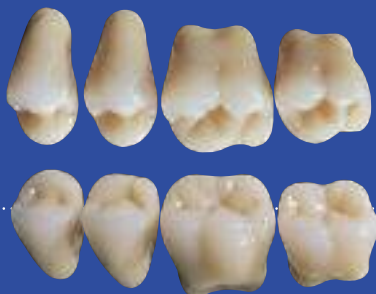




## Materiale DCL biocompatibile

La base del dente SR Ortholingual DCL é il materiale Double-Cross-Linked. Ricerche tossicologiche confermano la biocompatibilità di questa resina di elevata qualità.

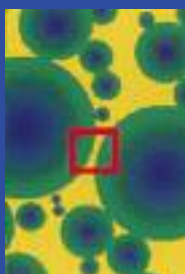- buona compatibilità tissutale
- ottimale resistenza all'abrasione
- resistenza alla formazione di placca
- ottime caratteristiche di lucidabilità
- ottimo legame al materiale per protesi
- buone caratteristiche di rifinitura
- eccellente resistenza in cavo orale



-  **Matrice**  
Polimero omogeneo reticolato
-  **Riempitivo**  
Sfere PMMA insolubili, rigonfiabili, reticolate
-  **Strato di diffusione**  
Matrice introdotta nella sfera reticolata

## Ampio spettro cromatico:



### Colori

- CHROMASCOP
- A – D
- BLEACH

Protesi parziale



Protesi combinata



Protesi rimovibile supportata da impianti



Protesi ibrida



Protesi totale



„I denti SR Ortholingual offrono tutti i vantaggi, che dovrebbero avere i denti lingualizzati. Denti ortolingualizzati, secondo la mia opinione, sono più estetici e più semplici nel montaggio, rispetto ad altri denti in commercio. Io sono entusiasta delle nuove forme denti.“

*Dr. Robert Engelmeier, Graduate Program Director Department of Prosthodontics University of Texas, Houston*



„Sono particolarmente soddisfatto del montaggio semplice di questi denti, nonché del loro aspetto naturale. In particolare nel campo della protesi totale questi denti dovrebbero contribuire notevolmente al miglioramento della qualità di vita del paziente.“

*Dr. Brien R. Lang, Professor Emeritus, Department of Biologic and Material, Sciences/Prosthodontics University of Michigan*



„L'aspetto oclusale dei denti SR Orthoplane DCL ed SR Ortholingual DCL, unitamente ad un'elevata efficienza masticatoria, fanno sì che si raggiunga un'occlusione bilanciata, consentendo inoltre un risultato ottimale per quanto riguarda l'equilibrio della riabilitazione.“

*Dr. Sheldon Winkler, Major Eastern Dental School*