

Programat®

UNA STORIA DI SUCCESSO

GARANZIA
2 ANNI



Programat®
P300

PER COLORO CHE AMANO LA PRATICITÀ

ivoclar
vivadent®

Programat® P300

PER COLORO...



Pratico

Compatto, concentrato all'essenziale, il nuovo forno per cottura Programat P300 affascina per il suo semplice concetto d'impiego convincente. Ben visibile e immediatamente comprensibile, mediante simboli conduce attraverso i programmi di cottura in maniera mirata e chiara.

Affermato

Per quanto riguarda la tecnologia di cottura, il nome Programat è naturalmente sinonimo di innovazione, qualità ed una pluriennale storia di successo. La nuova tecnologia della resistenza QTK (tubo al quarzo Kanthal) assicura una radiazione termica ancora più omogenea. Ne derivano risultati di cottura ottimali, di cui ci si può fidare.


Economico

Lavorare in modo economico nel Programat P300 è scontato: rapido sistema di apertura della cappa, tecnologia di riscaldamento di elevate prestazioni, costruzione robusta ed facile manutenzione sono soltanto alcuni dei punti che in futuro Le renderanno il lavoro quotidiano più confortevole.

I VANTAGGI DETERMINANTI


Semplice impiego

Display grafico con simboli chiari, che visualizzano già valori possibili.

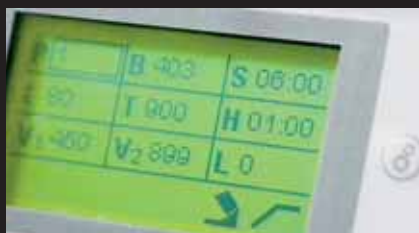

Ottimali risultati di cottura

- Radiazione termica omogenea, grazie alla nuova tecnologia della resistenza QTK (tubo al quarzo Kanthal)
- Impiego economico grazie alla lunga durata della resistenza

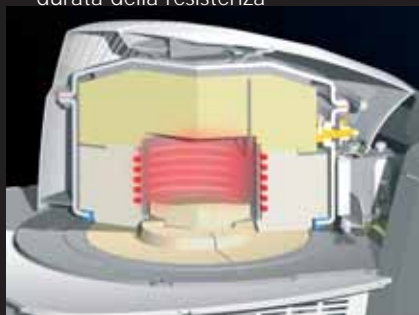

100 programmi di cottura

- programmi standard pre-impostati (per IPS e.max®, IPS InLine®, IPS d.SIGN® ed IPS Empress®)
- programmi individuali




... CHE AMANO LA PRATICITÀ

LE PARTICOLARITÀ



Sistema Turbo-Opening

Lavorare in maniera efficiente con il sistema Turbo-Opening (5 sec.)

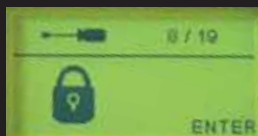


Pratica protezione da scrittura

Protezione generale mediante inserimento di codice



Cappa estraibile

Facile manutenzione, grazie alla cappa estraibile.

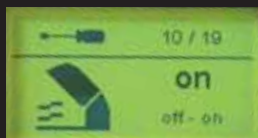

Programma di preasciugatura

A cappa aperta, consente nuove possibilità nella preasciugatura.



Programma di calibratura della temperatura

Per la calibratura con prova d'argento.



Power Fail Save

Supera una breve interruzione di corrente, senza che il programma venga interrotto.

ULTERIORI VANTAGGI

- rapido ri-start, grazie al veloce raffreddamento della cappa
- diversi utili programmi di configurazione ed ausiliari
- utile programma di diagnosi (p.es. test del vuoto, della resistenza e della tastiera)
- sistema di segnalazione errori integrato (Error)
- affermata meccanica di orientabilità della cappa
- design compatto ed ergonomico

Programat® P300

DATI TECNICI

Allacciamento elettrico	110-120 V 50-60Hz 200-240 V 50-60Hz oscillazioni di tensione ammesse $\pm 10\%$
Assorbimento di corrente max.	12 A a 110-120 V 8.5 A a 200-240 V
Dati per le pompe per vuoto	Assorbimento di corrente max: 2.1 A Vuoto finale: < 50 mbar Impiegare soltanto pompe testate
Display	Grafico con display LCD con illuminazione di sfondo
Dimensioni fusibili elettrici	110-120 V: diametro 6.3 x 32 mm 200-240 V: diametro 5 x 20 mm
Dimensioni del forno chiuso	Profondità: 468 mm Larghezza: 303 mm / 382 mm (con piastra d'appoggio) Altezza: 320 mm
Dimensioni camera di cottura	Diametro: 80 mm Altezza: 48 mm
Temperatura di cottura max.	1200°C
Pesi	Parte inferiore: 12.6 kg Cappa: 4.5 kg
Indicazioni di sicurezza	Il forno per cottura è stato costruito secondo le seguenti norme: - IEC 1010-1 rispett. EN 61010 - UL e cUL standard
Radioprotezione/compatibilità elettromagnetica	Testata EMV



PRESENTAZIONE

- 1 Programat P300
- 1 piastra d'appoggio per oggetti
- 1 cavo di allacciamento
- 1 portaoggetti Programat
- 1 set controllo temperatura
- 1 set fusibili di ricambio

Accessori consigliati:

- (con contenuti nella presentazione di cui sopra)
- pompa per vuoto VP3 easy o VP3
 - pinza per Programat
 - set controllo temperatura

Colore:

Bianco (RAL 9016)



VP3 easy



VP3

Le descrizioni e i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà dei prodotti.
Stampato in Austria
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
602139/0606/1/VVA

Produttore
Ivoclar Vivadent AG Technical
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Fürstentum Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Distribuzione Italia
Ivoclar Vivadent s.r.l. Technical
Via dell'Industria 16
I-39025 Naturno (BZ)
Italia
Tel. 0473 / 67 01 11
Fax 0473 / 66 77 80
www.ivoclarvivadent.it
e-mail info@ivoclarvivadent.it

ivoclar
vivadent®